

# SONOCLEANER

## CUVES de NETTOYAGE par ULTRASONS

*une gamme complète de 3 à 30 litres*

**EFFICACES et ERGONOMIQUES**

**INDEPENDANTES**




2012-TR

**ENCASTRABLES**



2017-E

*La chaîne d'asepsie  
manuelle*

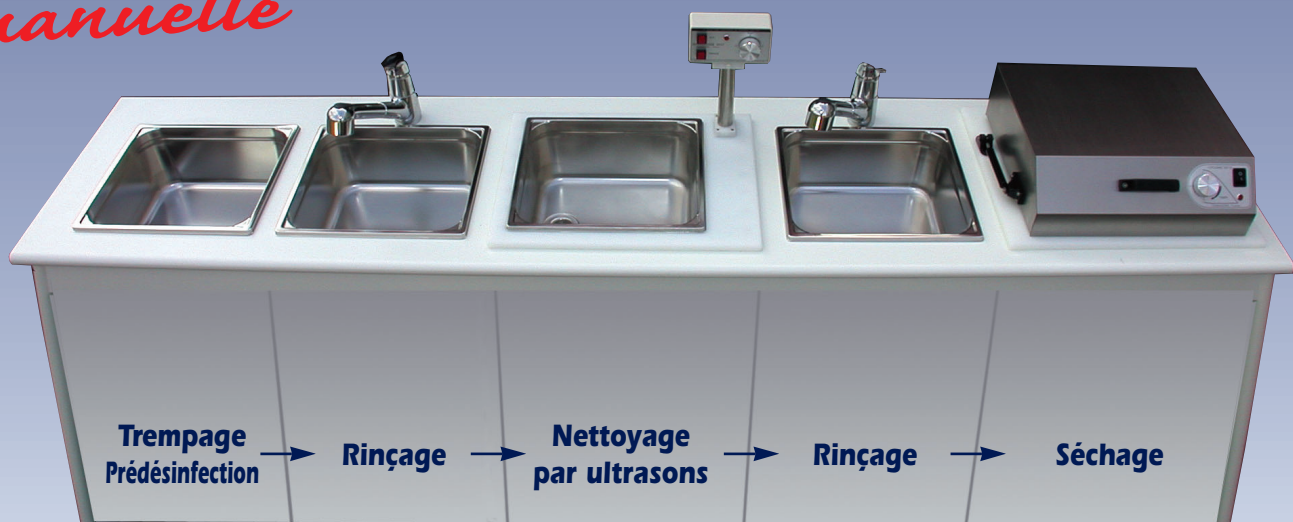

**GAMASONIC**


# SONOCLEANER



COUVERCLE INSONORISANT CS 12




Kit DYNASEPT KD 6

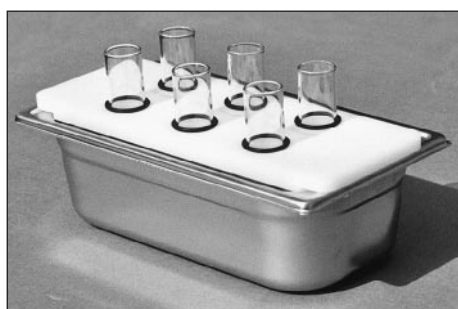

Bac pour Kit DYNASEPT BK6




PRODUITS POUR ULTRASONS

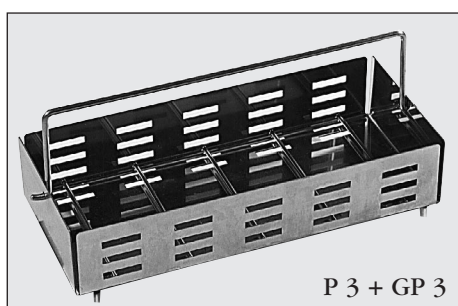


P 3 + GP 3

PANIER INOX 250 x 110 x 55

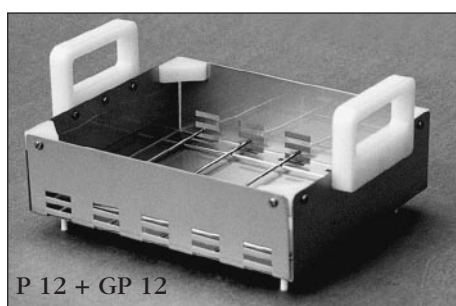

P 12 + GP 12

PANIER INOX 250 x 210 x 70

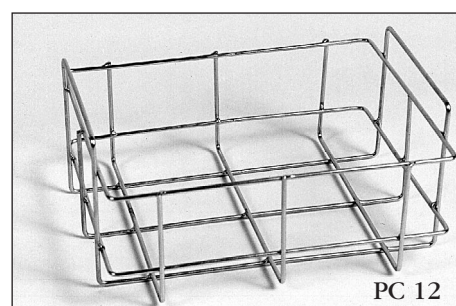

PC 12

PANIER PORTE-CASSETTES 290 x 235 x 140

MODELE	PUISSANCE Efficace	DIMENSIONS Intérieur cuve	DIMENSIONS Hors tout	VIDANGE	VOLUME Cuve	POIDS Kg.
2003-E 2003-T	180 W.	295x150x100	445x195x230 395x195x230	Robinet 1/4 tour	3,5 L.	8
2009-T	250 W.	295x235x150	345x285x290	Robinet 1/4 tour	9 L.	10
2012-E 2012-TR	500 W.	330x295x150	480x380x380 500x370x325	POMPE	13 L.	16 18
2017-E 2017-TR	500 W.	330x295x200	480x380x380 500x370x325	POMPE	17 L.	16 18
2030-E 2030-T	750 W.	500x295x200	660x380x380 670x380x430	POMPE	28 L.	26 28

E : Modèles Encastrables

T : Modèles de Table, avec carrosserie peinte Blanc RAL 9010 et pupitre de commande en façade de carrosserie

TR : Modèles de Table, avec carrosserie peinte Blanc RAL 9010 et pupitre de commande en façade de carrosserie

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les appareils de nettoyage par ultrasons de la gamme SONOCLEANER sont livrés avec un couvercle inox (autres accessoires en option).

La cuve de nettoyage est réalisée en acier inoxydable de qualité alimentaire.

Le support cuve est réalisé en PEHD, matériau offrant toutes les qualités pour un entretien facile et une bonne insonorisation.

Les ultrasons sont générés par une fréquence oscillant de 32 à 38 KHz.

Le niveau acoustique, mesuré à un mètre de distance de l'appareil, varie de 75 dB. à vide à 67 dB. en charge avec couvercle insonorisant (mesures effectuées en modèle 2012-TR).

NB : Le niveau sonore acoustique peut être modifié suivant l'environnement. Alimentation électrique : 230 V. - 50 Hz. + prise de terre.

## APPAREILS ENCASTRABLES (E)

Ils sont étudiés pour être incorporés dans un plan de travail avec une facilité remarquable. Une simple découpe du plan de travail aux cotes préconisées permet d'installer l'appareil (voir manuel d'implantation).

Raccorder le tuyau de vidange et le câble d'alimentation électrique suivant la notice d'instructions.

## APPAREILS DE TABLE (T - TR)

Mêmes caractéristiques que les modèles encastrables sauf pour la vidange qui pourra s'effectuer soit comme l'encastrable, soit dans un évier à proximité.

## ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires (paniers, supports béciers, couvercles insonorisants, paniers porte-cassettes, ...produits de nettoyage...) permet de répondre à la plupart des applications.

## ENTRETIEN

- **Cuve inox** : éponge humide + savon doux + produit anti-calcaire du commerce.
- **Carrosserie** : éponge ou chiffon légèrement humide ou PROCLEAN pur sur papier essuie-tout.