

NEW BORA 2

Iconic reliability



La turbine Bora n'a cessé de confirmer la qualité de son modèle d'ingénierie et sa grande fiabilité qui l'ont faite perdurer toutes ces années.
Elle est aujourd'hui la turbine la plus vendue de Bien-Air.
Fort de la confiance que vous lui témoignez, il était important pour nous de faire perdurer cet héritage.

S W I S S  M A D E

1991

Une icône est née

BORA 2

*le passé
est acquis,
le futur assuré.*

La fiabilité et la longévité
de la turbine Bora ne sont
plus à démontrer.



Le nouveau design
de la turbine Bora 2 assure encore
plus de performances, tout en gardant
la fiabilité légendaire qui a caractérisé
les versions précédentes depuis 1991.

SWISS  MADE



FIABILITÉ EXTRÊME ET PLUS DE PERFORMANCES.

Le nouveau design de la Bora 2 assure encore plus de performances, tout en gardant la fiabilité légendaire qui a caractérisé les versions précédentes depuis 1991.



PLUS ROBUSTE.

La tête de la Bora 2 est totalement réalisée en acier inox. Sa solidité en est augmentée lui conférant ainsi une plus grande résistance aux chocs.



PLUS PUISSANTE.

Avec une puissance et un couple améliorés de **20 %**, la Bora 2 vous permet de découper **2 fois plus rapidement**. Gagnez un temps précieux avec la nouvelle Bora 2!



RIEN NE VOUS GÊNERA.

Afin de garantir la meilleure irrigation de la zone d'opération, le système **Accu-Spray Quattro Mix™** fait converger quatre sprays air/eau asymétriques vers l'extrémité de la fraise, avec la précision du laser. L'éclairage LED assure également une visibilité parfaite de la cavité buccale.

NEW DESIGN.



S W I S S  M A D E



DURÉE DE VIE PROLONGÉE.


Le design optimisé du rotor ainsi que des nouveaux roulements à billes en céramique encore plus résistants à l'usure garantissent une durée de vie prolongée de **35 %** par rapport à la génération précédente.

PRECISION ACCRUE.

Le mécanisme d'entraînement et de serrage **Accu-Chuck PreciPlus** assure un serrage infaillible de la fraise. Les vibrations sont fortement réduites conférant ainsi à la Bora 2 une stabilité et un confort inégalés, pour une intervention dentaire extrêmement précise.

PLUS DE SÉCURITÉ.

Intégrée dans le bouton-poussoir de la tête des turbines, la technologie anti-chauffe brevetée **Cool Touch** empêche toute accumulation de chaleur pour diminuer les risques de brûlure de vos patients.

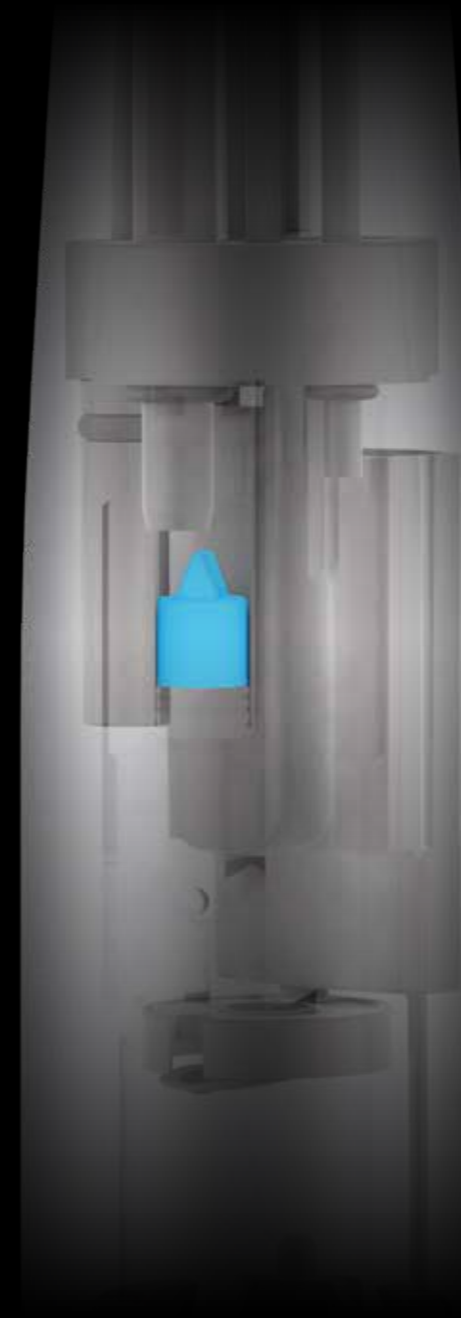

DIMINUTION DES RISQUES DE CONTAMINATION CROISÉE.

Diminution des risques de contamination croisée grâce à la **valve anti-retour** et à la protection **Sealed Head**.

La valve anti-retour réduit considérablement le reflux de fluides provenant de la cavité buccale dans les tuyaux de l'unité dentaire. De plus, le mécanisme de protection **Sealed Head** réduit l'effet d'aspiration de fluides dans la tête de l'instrument.

PLUS PETIT, C'EST MIEUX.



PLUS PETITE TÊTE.

Grâce à la réduction de la tête de la Bora 2 qui mesure maintenant moins de **12 mm** de diamètre et à peine **13 mm** de hauteur, votre champ de vision est augmenté. L'accès à l'arrière de la cavité buccale en est aussi facilité, pour encore plus de confort.

BORA 2 LED

20 watts

59 dBA

Dimensions tête Ø 11.9 mm 13.2 mm

4 sprays air / eau mixtes asymétriques

Valve anti-retour

Eclairage LED

2 ans de garantie

Bora 2 LED 1601152-001

BORA 2 LK

20 watts

59 dBA

Dimensions tête Ø 11.9 mm 13.2 mm


4 sprays air / eau mixtes asymétriques

Valve anti-retour

Eclairage LED

2 ans de garantie

Bora 2 LK 1601153-001

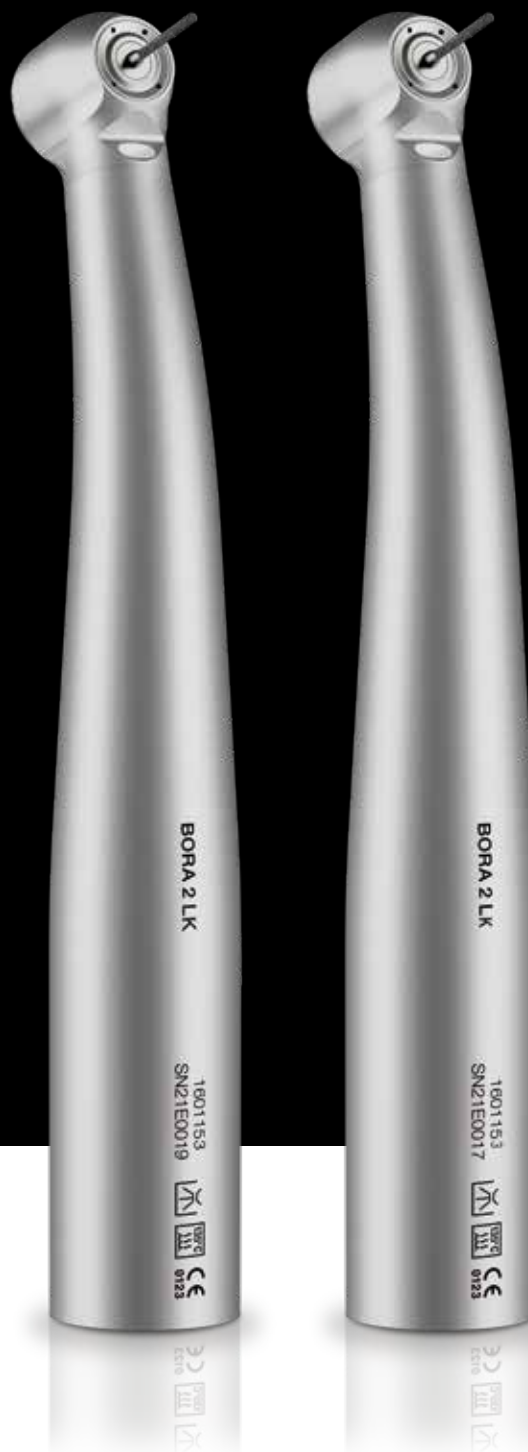

WWW.BIENAIR.COM

S W I S S  M A D E

En savoir plus

